

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST

NOUVEAU

TWISTEZ*
ET VOUS ÊTES
PROTÉGÉ** !



*Tourner **Conforme au standard en vigueur EN ISO 23908



LES BLESSURES PAR PIQÛRE D'AIGUILLE : UN RISQUE IMPORTANT POUR LA SANTÉ.

Parmi les 35 millions de professionnels de santé, l'Organisation Mondiale de la Santé estime que 3 millions d'entre eux souffrent d'exposition percutanée à des agents pathogènes transmis par le sang chaque année.⁽¹⁾



SANTÉ

Parmi le personnel soignant, environ 40% des infections par HBV et HBC et 2,5% des infections par le VIH sont attribuables à des Accidents d'Exposition au Sang



LÉGISLATION

De nombreuses agences de santé ont mis en place des législations pour prévenir les blessures par piqûre d'aiguille nécessitant la mise en œuvre d'une procédure de sécurité, l'utilisation de dispositifs d'injection sécurisé et l'interdiction de recapuchonner les aiguilles

Décret publié au Journal Officiel du 31 août 2013 faisant obligation d'utiliser les dispositifs médicaux de sécurité mis à disposition comme une solution efficace pour prévenir les **AES**⁽²⁾.

(1) WHO, The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life, 2002

(2) Accidents d'Exposition au Sang

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST

FACILE ET SÛR

- > **Conçu pour vous protéger** des AES⁽²⁾
- > **Dispositif marqué CE et respecte les exigences** pour la protection contre les blessures⁽³⁾
- > Système **intuitif**
- > **Disponible avec des poignées à usage unique stériles ou avec des poignées réutilisables** pouvant être stérilisées.

Aspiration active ou passive :
sécurité pour le patient

Fourreau transparent :
l'aspiration est visible


Gaine de protection coulissante :
protection contre les blessures par piquûre d'aiguille

2 positions différentes :
Position initiale de verrouillage (réversible)
Position finale de verrouillage (irréversible)

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE

Une étude a démontré que, lorsqu'elle était manipulée dans une école dentaire, Ultra Safety Plus était un facteur clé de succès pour éviter les blessures par piqûre d'aiguille.

FRÉQUENCE DES PIQÛRES D'AIGUILLES

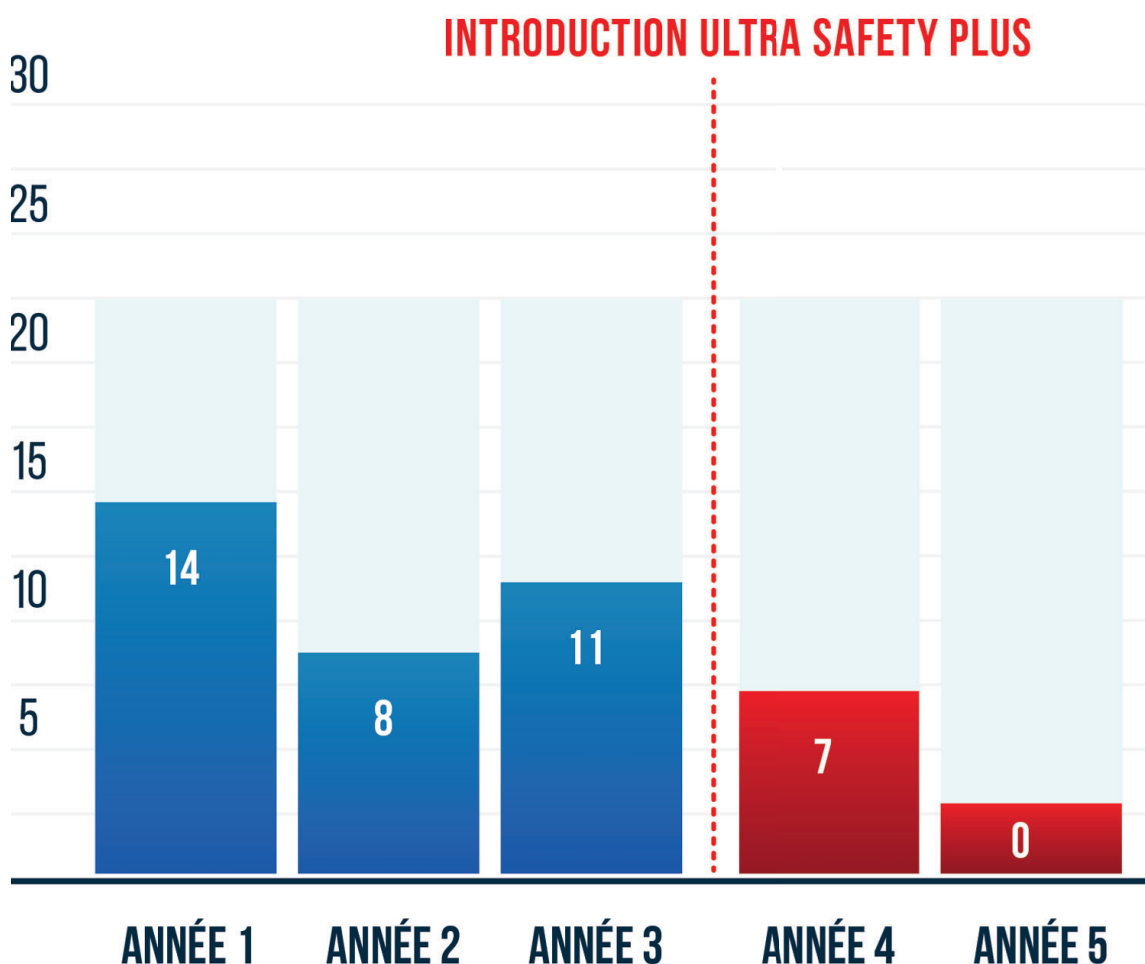

Avec Ultra Safety Plus, les blessures évitables par piqûre d'aiguilles sont passées d'une moyenne de 11,8 à **0 blessure** par 1 000 000 d'heures travaillées.⁽⁴⁾

(4) J.M Zakrzewska et al. Introducing safety syringes into a UK dental school – a controlled study. Brit Dent J 2001 ; 190; 88-92.

UN NOUVEAU CONCEPT INTUITIF ET BREVETÉ

Seulement 2 étapes
nécessaires pour un
assemblage sécurisé.


ULTRA SAFETY PLUS

TWIST

Un système
de verrouillage
sécurisé


1.

Introduire les ergots
sur la poignée dans
les encoches du tube

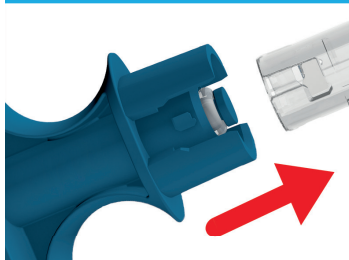

2.

Tourner la poignée dans
le sens des aiguilles d'une
montre pour verrouiller

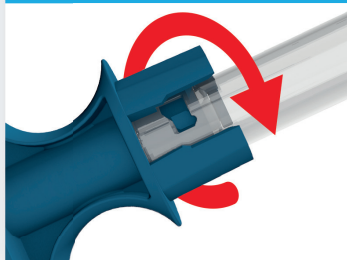

Pour plus de détails, consulter le mode d'emploi

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST



**1 BOITE DE 100 AIGUILLES STÉRILES
+ 1 POIGNÉE STÉRILISABLE**



1 BOITE DE 50 POIGNÉES STÉRILES À USAGE UNIQUE



1 POIGNÉE STÉRILISABLE

LONGUEUR	TAILLE	CODE COULEUR
0,40 X 08 MM	27 G	
0,30 X 10 MM	30 G	
0,30 X 12 MM	30 G	
0,30 X 16 MM	30 G	
0,40 X 16 MM	27 G	
0,30 X 21 MM	30 G	
0,40 X 21 MM	27 G	
0,30 X 25 MM	30 G	
0,40 X 25 MM	27 G	
0,50 X 35 MM	25 G	
0,40 X 35 MM	27 G	

Ultra Safety Plus Twist : Ce système est un assemblage de dispositifs médicaux - Dispositif d'injection (Classe IIa - CE 0459) - Poignées réutilisables (Classe I). Reportez-vous aux notices d'utilisations des dispositifs médicaux pour plus d'information. Poignée stérile (Classe Is - CE 0459). Réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - FRANCE
Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.septodont.fr

