

DENTAPEN®

VOS ANESTHÉSIES
REPRODUCTIBLES ET SANS EFFORT




Seringue électronique
pour l'anesthésie dentaire



QUI MIEUX QUE SEPTODONT...

Une fois de plus, Septodont innove avec Dentapen : la solution haute performance pour vos injections intra-ligamentaires, para-apicales, tronculaires, palatines.

VITESSE D'INJECTION IDÉALE, CONTRÔLÉE ÉLECTRONIQUEMENT

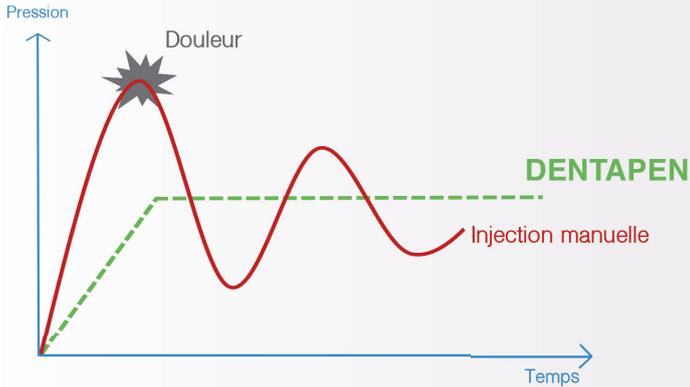


Le débit d'injection démarre en goutte à goutte et augmente progressivement, de façon constante, jusqu'à atteindre la vitesse sélectionnée. La vitesse régulée électroniquement minimise la douleur et permet une injection reproductible et atraumatique.



UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE



* Données fabricant

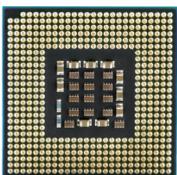

Pression d'injection contrôlée par microprocesseur

+



Algorithmes de contrôle avancés

+



Composants moteur issus de l'industrie horlogère Suisse

+



Technologie de fabrication de pointe PCB-Flex qui permet de minimiser l'espace utilisé.

+



Très puissant : pousse jusqu'à 13 kg de force soit 260 fois son propre poids

POUR VOUS

L'ERGONOMIE

Concentrez-vous uniquement sur le point d'injection



Sans fil

Aucune tension sur la main ou la seringue



Pas de chargeur pas d'écran de monitoring

Gain de place



Commande manuelle intuitive

Pas besoin de pédale



PRISE **SERINGUE**



PRISE **STYLO**

INJECTION REPRODUCTIBLE

SANS EFFORT } Prévient les troubles musculo-squelettiques



Légère

Inférieure à 50 g



Compatible

Avec toutes les cartouches et aiguilles du marché



Manipulation aisée et précise

Pas de formation, même prise en main qu'une "seringue classique"




**SWISS
MADE**

POUR VOS PATIENTS

INJECTION ATRAUMATIQUE

Contrôlez la douleur liée à l'injection



Infiltration douce et sans douleur

2 modes



3 vitesses

Lente, moyenne ou rapide



Design high-tech et compact

Diminue l'anxiété et le stress chez le patient et permet l'entrée de nouveaux patients dans le parcours de soin

**SANS FORMATION,
PRISE EN MAIN ET
UTILISATION IMMÉDIATES**

5 BOUTONS INTUITIFS, ACCESSIBLES DU BOUT DES DOIGTS



Taille réelle

I / O Marche / Arrêt

 =   =   =  Témoin de charge de la batterie

 =  1 ml x  30 s.

 =  1 ml x  60 s. Vitesse d'injection

 =  1 ml x  100 s.

 = 

Mode intraligamentaire : la pression reste constante, avec une vitesse d'injection qui s'adapte automatiquement à la densité des tissus.

 =  

Mode progressif : démarre en goutte à goutte et augmente progressivement, de façon constante, jusqu'à atteindre la vitesse sélectionnée.

 =  **Recul de la crémaillère :** retour à la position initiale pour insérer une nouvelle cartouche.

**DENTAPEN,
LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
DE SERINGUE
ÉLECTRONIQUE**

DENTAPEN

**VOS ANESTHÉSIES
REPRODUCTIBLES
ET SANS EFFORT**

LES BÉNÉFICES



Moins de douleurs



Moins de stress



Des enfants conquis



Des patients satisfaits



La confiance



DES CONSOMMABLES À UN COÛT NÉGLIGEABLE

Accessoires disponibles dans le coffret



5 x

Repose-doigts



5 x



7 x

Porte-cartouches



3 x

Piles



25 x

Housses de protection à usage unique
du système motorisé d'injection



Tous les consommables sont disponibles séparément. Les repose-doigts et les porte-cartouches doivent être stérilisés avant utilisation.

DENTAPEN
par Septodont

LA SOLUTION IDÉALE
POUR VOS ANESTHÉSIES



Dispositif médical de Classe IIa réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE2460 DNV GL
NEMKO Presafe AS. Fabricant : Juvaplus - Suisse. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.
Service Communication France - 10730W - Octobre 2020

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.septodont.fr